

高周波・負電荷美容器 美アニオン

美ANION

取扱説明書



ご使用前に必ずお読みの上、正しくお使いください。
また、いつでもお読みいただけるよう、大切に保管してください。

目次

正しく安全にお使いいただくために

禁忌・禁止・併用禁忌	3
1. 一般的注意事項	5
2. 使用前のご注意	7
3. 使用中のご注意	9
4. 使用後のご注意	9
貯蔵・保管方法及び使用期間	9
取扱上のご注意	10
保守・点検に係る事項	11
ビューティーマット敷き方のご注意	13

構成内容

本体	14
標準付属品	15
本体の各部名称とはたらき	16

美ANIONの特徴

1. プロポーシオンを整える「高周波」	18
2. 高周波の「変化の出力」について	18
3. お肌を整える「負電荷」	19
4. 時間と出力について	19

ご使用にあたって

高周波モード—基本的な使用例	20
負電荷モード—基本的な使用例	22
高周波モード—使用順序	24
負電荷モード—使用順序	26

こんな時どうしたらいいの？

1. 出力を確認したい	28
2. エラーが表示される	28
3. パネルの明るさを調整したい	29
4. ブザー音を消したい	29
故障かな？と思ったら	30

お客様安心サービス

裏表紙
保証書とユーザー登録カードについて
アフターサービス
ISO認証取得

正しく安全にお使いいただくために

- 取扱説明書は本器を安全にお使いいただくために必要です。
- 本器を人に貸したり、差し上げる時には必ずこの取扱説明書を一緒にお渡してください。
- ご使用前に、この「取扱説明書」をよく読み、注意事項を守り正しくお使いください。
- 「取扱説明書」は大切に保管してください。

（ 禁忌・禁止 ）

次のような人および部位には使用しないでください。


- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人。
- 金属製物質（人工骨頭、埋没くぎ、金属製クリップなど）やプラスチックなどを体内に植え込んだ人。
- 乳幼児（6才以下、異常に対して意思表示ができない危険があります）。
- 適応部位の皮膚に異常（感染症、創傷など）のある人。
- 頭部（脳、目、耳等）。
- その他、医師が不相当と認めた人。


（ 併用禁忌 ）


- ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器とは同時に使用しないでください。
- 心電計などの装着形の医用電気機器とは同時に使用しないでください。
- 医療機器や電気機器とは同時に使用しないでください。使用する場合は時間をずらして使用してください。
- 補聴器は外してください。

正しく安全にお使いいただくために

- お客様や他の人への危害や、財産への損害を未然に防止するために、下記のような絵表示をしています。危害や損害の程度を表わしていますので、内容を理解してから本文をお読みください。

 **危険** …………… 取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫っていることが想定される内容を示します。

 **警告** …………… 取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** …………… 取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性、または、物的損害が想定される内容を示します。

● 表示例



は、本器の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するための絵表示です。

※表示例は「感電注意」です。



は、本器の取扱いにおいて、その行為を禁止する絵表示です。

※表示例は「分解禁止」です。



は、本器の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する絵表示です。

※表示例は「プラグをコンセントから抜く」です。



愛情点検

修理点検の確認をお願いする絵表示です。

1. 一般的注意事項

⚠ 危険

- ❌ 電源が入っていない状態、あるいは電源コードを接続していなくても、導電性のあるものの上では使用しないでください。

例) 他の電位、電床(高周波・負電荷を含む)マット、電気毛布や敷布、電気カーペット

電気毛布やビューティーマットが焦げて火傷や火災などの恐れがあります。

- ❌ 電源が入っていない状態、あるいは電源コードを接続していなくても、ビューティーマットの上では、ボディスリムパットNを使用しないでください。

- ❌ ビューティーマットの上では、超短波(マイクロ波含む)を使用しないでください。

ビューティーマットが焦げて火傷または熱傷、火災などの恐れがあります。



(ビューティーマットが本体に接続されていない場合も同様です)。




- ❌ ビューティーマットやボディスリムパットNは、金属製のイスや湿った布団など電気を通しやすい物の上や下で使用しないでください。

- ❌ 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。

⚠ 警告

- ❌ 他の機器の部品や付属品などを流用しないでください。

規格や仕様が異なると、事故や故障の原因となります。

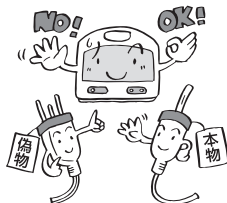

⚠ 警告

- ❌ 日頃の美容以外の目的で使用しないでください。特にペットへの使用は避けてください。

- ❌ 他の機器や電気製品(電気毛布や電気カーペット、敷布、こたつ、あんななど)との同時使用はしないでください。

過度な刺激で体調を損なったり、電気製品が誤作動したり、電気毛布や電気カーペットが焦げるなど事故の原因となります。

- ⚠ ビューティーマットやボディスリムパットNが濡れていたり、湿っている場合は十分に乾燥させてから使用してください。ドライヤーを使用したり、ストーブにあてるなど急激な乾燥はしないで、陰干しなど自然に乾燥させてください。

- ❌ 本体を寒い場所から温かい場所に移動した直後に使用しないでください。

本体内部で「結露現象」が生じる恐れがあります。この状態で使用すると表示部の誤作動や故障の原因となります。使用する時は移動後2時間以上経過してから電源を入れてください。

- ⚠ 電動ベッドの上で本器を使用する場合は、必ず電動ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。

誤作動や故障の原因となります。

- ❌ 本体背面の通気孔をふさぐような使い方(布団の上に置いたり、布団をかぶせたり、壁に寄せるなど)はしないでください。

本体内部が熱をもち、故障の原因となります。



- ❌ 連続して8時間以上使用しないでください。

電源を入れたまま放置すると機器の寿命を縮めたり、事故の原因となります。

正しく安全にお使いいただくために

警告


- ⊘ 交流100V、50/60Hz以外では使用しないでください。

規格の異なる海外での使用は発火、ショート、感電などの原因となります。

- ⊘ コンセントや配線器具の定格容量を超える使い方はしないでください。

タコ足配線などで定格容量を超えると発熱による火災の原因となります。

また、タコ足配線をするると本器や他の電気製品がお互いに誤作動する可能性があります。

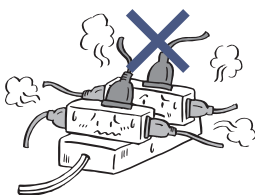

- ! 定められた手順で操作してください。また、子供には操作させないでください。

操作を誤ると事故や故障の原因となります。

- ⊘ 本体の上に重いものや飲み物などを置かないでください。

内部に水が入ると発火、ショートなどの事故や故障の原因となります。

- ⊘ 電源コードなどすべてのコード類を傷つけたり、破損したり、無理に引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだりしないでください。

- ⊘ 電源プラグなどすべてのプラグにゴミ、ほこりなどを付着させて使用しないでください。


発火、ショートの原因となります。

- ⊘ 保護者、医師、又は専門家の監督下以外では、子供に使用させないでください。また、子供が機器本体及び導子で遊んだり、上に乗ったりしないようにしてください。

警告

- ⊘ ビューティーマットやボディスリムパットNに金属を接触させたり出力口に金属製の棒やハサミ、ピンなどを差込まないでください。また、ビューティーマットとボディスリムパットNのコードには金属類を近づけたり他の電気のコードと交わらないようにしてください。

感電、発火の原因となったり、他の電気製品に異常を起こすなどの恐れがあります。

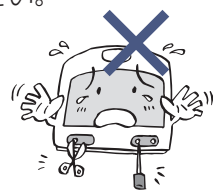

注意

- ! 他の電気製品とはできるだけ(2m以上)距離をあけて使用してください。

他の電気製品に異常をきたしたり、逆に電気製品の影響で本器に異常が発生する恐れがあります。

- ⊘ 使用中は他の人や金属類に触れたり、リモコンや電話機を操作したりしないでください。

ピリッとしたり、ノイズを発生させたり、故障の原因となります。

- ! 梅雨期や湿気の多い地域では、ビューティーマットや布団を十分乾燥させるなど、絶縁状態をできるだけよくしてください。絶縁状態が悪くなると効果が弱まります。

- ! 使用回数は年齢などにより個人差があります。取扱説明書をよくお読みになり、定められた使用時間を超えないようにしてください。不明な点はお求めの販売店またはお客様相談室(裏表紙)に相談してください。

2. 使用前のご注意 ●次の人は、医師と相談の上、使用してください。

- 警告**
- ❗ 病名などがはっきりしない人
 - ❗ 悪性腫瘍のある人
 - ❗ 心臓に障害のある人
 - ❗ 妊産婦
 - ❗ 体温38℃以上（有熱期）の人
例1) 急性炎症症状【倦怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期
例2) 衰弱しているとき

- 警告**
- ❗ 安静を必要とする人
 - ❗ 血管障害の恐れのある血圧異常の人
 - ❗ 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【疼痛性】疾患の人
 - ❗ 寝たきりの人
 - ❗ その他医師の治療を受けている人や体に異常を感じている人

1時間以上使用する場合、次の人は、医師と相談の上使用してください。

- 警告**
- ❗ 高血圧の人
 - ❗ 不整脈のある人

- 警告**
- ❗ 睡眠時無呼吸症の人
 - ❗ 喘息の人

次の人は介護者のもとでご使用ください。

- 警告**
- ❗ マヒなどで身体の自由が利かない人

- 警告**
- ❗ 7～12歳の子供

次のような人や部位への適用を慎重にしてください。

- 警告**
- ❗ 認知症の人や、意思表示ができない人
 - ❗ 判断能力を欠くほどお酒を飲んだ人
 - ❗ 睡眠薬を飲んだ人（判断能力を欠き事故の原因となります）
 - ❗ 次のものを身に付けたまま使用しないでください。
 - 使い捨てカイロ
 - 金属類（ネックレス、ベルト、時計、メガネ、イヤリング、車のキー（キーレスエントリーキー含む）など）
 - 導電性衣料（光により熱が高まる機能繊維、サンダーロン[®]繊維使用もしくはジャンヌ・ダルクなどのサンダーロン[®]繊維を含む肌着などの衣

- 警告**
- 料、ラメ入り、金糸・銀糸入りや炭素繊維・静電気防止用繊維など）
- また、次のようなものの上や周囲では使用しないでください。
- 特殊綿（プラチナ繊維、トルマリンなど）や炭素材入り布団・まくら
 - 磁気入り布団
 - 墨入り（炭素材など）の畳
 - ソース・醤油・墨汁・インクなどのシミがついた座布団・布団・畳
- 火傷または熱傷などの事故の原因となります。

- 注意**
- ⊘ 金属繊維などの導電性物質を含む布団とともに使用しないでください。

正しく安全にお使いいただくために

警告

❗ 全てのコードは容易に離脱しないように正しく確実に接続してください。

発火やショートなどの原因となります。

❗ 導子（コード、プラグを含む）の損傷やコネクターの接続不良が無い
か、使用前に確認してください。万が一、不具合が確認された場合は、
使用しないでください。販売店または製造元へお問い合わせください。



しばらく使用しなかった本器を再使用するときは、使用前に必ず正常かつ安全に作動することを確認してください。また、6ヶ月以上使用しなかった場合は、使用前に販売店で点検を受けてください

スイッチなどを入れ、本体と付属品が正常かつ安全に作動するか確認してください。

❗ アースバンドは、天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発赤、じん麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。

このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

また、身体に巻く時は、かぶれや炎症などのある部位は避けてください。

❗ スイッチ、タイマーが、正常に作動するか確認してください。

❗ ビューティーマットやボディスリムパットNを使用する際は、正しく装着してください。

注意

❗ 絶縁方法に注意を要する場合もあるので、取扱説明書で指示している方法で使用してください。

❗ ごくまれに使用時に漏電ブレーカーが誤作動し、テレビやラジオなどに雑音が入ることがあります。また部屋の絶縁が悪いと出力が止まることもあります。この場合はアース端子を電源コンセントのアースに接続してください。詳細はお買い求めの販売店または製造元へお問い合わせください。

❗ 他の機器の近くでは、使用しないでください。特に超短波（マイクロ波含む）機器の近くで使用しますと、ごくまれに誤作動やエラー表示する場合があります。

その場合は再度電源を入れ直して使用してください。

⊘ フェイスパッドの使用部位に発疹・発赤・かゆみ等が現れた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

❗ フェイスパッドは肌に外傷部分がある場合は使用しないでください。

3. 使用中のご注意

警告

- ❗ 本器に異常を感じた時（異常音がする・本体が熱いなど）は、直ちに使用を中止してください。

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ❗ 身体に異常を感じたり、現れた時（発

警告

赤など）は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

- ❗ 雷や地震、停電時は使用を中止し、電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜いてください。

復帰時に事故や故障の恐れがあります。

4. 使用後のご注意

警告

- ❗ 電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

- ❗ コード類の抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。



コードを持って行くと断線やショートなどの原因となります。

- ❗ 電源コードを本体背面のフックに巻き付ける際、コードを強く巻き付けると本体からのコード引き出し部やコード自体にストレスが加わり断線する恐れがあります。

- ❗ 本体、付属品などは次回の使用に支障がないように清浄にし、整理保管してください。

注意

- ❗ 本体のお手入れは水かぬるま湯を含ませて固く絞った布で拭いてください。水洗いなどもしないでください。

変色・変形の原因となるのでシンナー、ガソリン、灯油などの揮発油や磨き粉、熱湯、薬品類で拭かないでください。

- ❗ 使用を中断する場合や使用後は必ずビューティーマットやボディスリムパットN、アース接続コードのプラグを本体から抜いてください。

電源プラグもコンセントから抜くなど、使用前の状態に戻してください。

- ❗ 機器を衛生的に保つための清掃、予防点検及び保守に関しては、「保守・点検に係る事項」を参照してください。

貯蔵・保管方法及び使用期間

保管場所については次の事項に注意してください。故障の原因になることがあります。

注意

- ❗ お子様の手の届かない所に保管してください。

落としてけがや破損の原因となります。

- ❗ 長期間ご使用にならない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

- ❗ 温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより、品質に悪影響を及ぼす恐れのない場所に保管してください。

機器の寿命を縮め、火災や感電などの原因となります。


正しく安全にお使いいただくために

取扱上のご注意

警告

- 濡れた手で本体の操作は、絶対におやめください。

感電の原因となります。

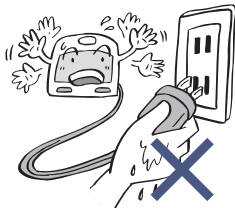

- 機器を他の物にぶつけたり、倒したり、落下など強い振動や衝撃を与えないでください。その時に異常がなくても内部の損傷が進み、故障、事故の原因になることがあります。

誤って落とした場合は必ず点検を受けてください。

- 本体や付属品が傷ついたり破損している場合は、使用しないで買い求めの販売店または製造元へお問い合わせください。

- 機器及び付属品または容器・包装品等を廃棄する場合は、環境への影響を少なくするため、地域で定められている規則に従って処分してください。

警告

- 本体ケースは絶対に開けないでください。内部は高電圧が発生しており、感電する恐れがあります。

- 間違った使用や乱暴な取り扱い、あるいは長年の使用は、コードの断線などにより、火傷または熱傷・火災など思わぬ事故の原因となることがあります。

- ビューティーマットやボディスリムパットNは、強く折りたたんだり、きつく丸めたり、重い物を乗せたりしないでください。

- ナフタリンなどの防虫剤と一緒に保管しないでください。

注意

- ビューティーマットやボディスリムパットNにアイロンをかけたたり、アイロン台の代わりにしないでください。

保守・点検に係る事項

1. 機器の故障及び改造に関する注意事項

警告

- ! アースバンドの汚れは、水または薄めた石けん水で生地を傷めないように手もみ洗いしてください。(月に1度までとする)

石けん水で洗った場合はかぶれの恐れがあるので、よくすすいでください。洗った後は、水分をタオルで拭き取り、日陰干しでよく乾かしてください。

直射日光にあるとゴム部分が特に傷み、ポロポロになることがあります。

- ! 本体のお手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

感電などの事故の原因となります。

- ⊘ 本体や付属品を勝手に修理したり、改造したりしないでください。

故障かなと思ったら使用を中止し、お買い求めの販売店または製造元へお問い合わせください。



注意

- ⊘ 本体のお手入れに際しては、シンナー、ガソリン、灯油などの揮発油や磨き粉、熱湯、薬品類で拭かないでください。変色、変質の原因となります。

アルコール、水、ぬるま湯又は中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭いてください。

- ⊘ フェイスパッドを洗浄の際は、洗濯機を使用しないでください。中性洗剤で水かぬるま湯で浸け置き洗い後、十分にすすいでください。

洗浄後は乾燥機の使用は避け、タオルなどでふき取り、陰干ししてください。洗浄と乾燥が不十分な場合、腐敗臭・カビなどの原因となります。

2. 使用者による保守点検事項

警告

- ♡ 事前のチェックや点検などで不具合が見られた場合は必ず取扱店または製造元にご連絡ください。

例) 付属品の絶縁、電源コードなどコード類のキズ、ひび割れ、断線のしかり、電源プラグやコネクタの接続不良など。

- ♡ 機器及び付属品は使用に際し、正しく作動することを日常的に点検してください。

警告

- ♡ しばらく使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認してください。

- ♡ フェイスパッドに破れやほつれが発生した際は使用せず、交換してください。

3. 業者による保守点検事項

注意

- ♡ 性能を維持し、安全に使用するため、定期的(1年を目安)にお求めいただいた取扱店または製造元に「定期点検」を依頼してください。



注意

- ♡ 消耗部品(付属品を含む)は定期的(3年を目安)に交換し、付属品及び機器使用中の危険防止を図ってください。

正しく安全にお使いいただくために

保守・点検項目

項目	内容	方法
外観及び表示について	外観に損傷はないか、パネルは変形していないか、表示がちらついたりしていないか確認する。	目視による
操 作	電源スイッチをONにし、正常に動作するか、不具合はないか確認する。	操作確認
付属品	損傷部分はないか、コードに断線部分はないか確認する。	目視による

交換部品及び消耗品

名 称	交換方法	交換時期
ビューティーマット	販売店又は製造元に依頼	<ul style="list-style-type: none"> • 購入から3年が目安 • 点検により劣化が認められた時
ボディスリムパットN	販売店又は製造元に依頼	
アースバンド	販売店又は製造元に依頼	
アース接続コード〈ホック型〉	販売店又は製造元に依頼	
スリムベルト	販売店又は製造元に依頼	<ul style="list-style-type: none"> • 損傷や汚れが認められた時
フェイスパッド〈L〉	販売店又は製造元に依頼	<ul style="list-style-type: none"> • 購入から3ヶ月が目安 • 損傷や汚れが認められた時
ボディスリムパットN用ベルト	販売店又は製造元に依頼	<ul style="list-style-type: none"> • 損傷や汚れが認められた時

●アースバンドについて

アースバンドおよびアース接続コード〈ホック型〉は消耗品です。下記のような場合は早めに交換してください。


- 各ホックのメッキがはがれる
 - バンドの裏が黒から白に変色する
 - バンドにシワがよる
- また、遅くとも3年以内で早めに交換してください。

ビューティーマット敷き方のご注意

● 下記の例を参考に敷いてください。 ※マットは、緑色の面を上にして敷きます。


布団の場合

布団とシーツの間に敷いてください。

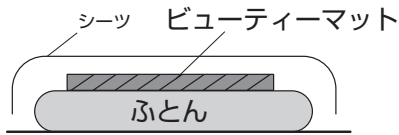


ベッドの場合

布団とシーツの間に敷いてください。布団や厚手のベッドパッドを敷いてください。

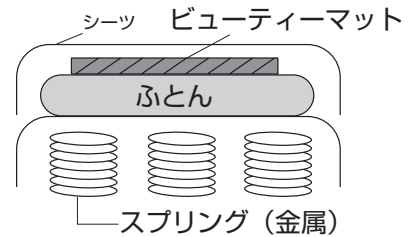


床・畳の場合

座布団の上に敷いてください。

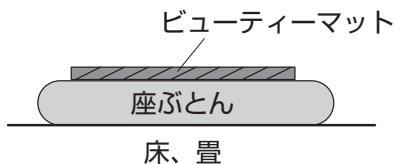


カーペットの場合

電気カーペットの上では絶対使用しないでください。毛足の長いカーペットも避けてください。

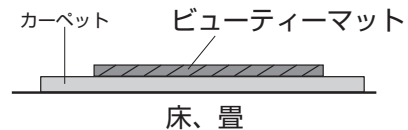


イスの場合

金属製のイスを使用すると、電気エネルギーが逃げてしまいます。木製のイスを使用してください。

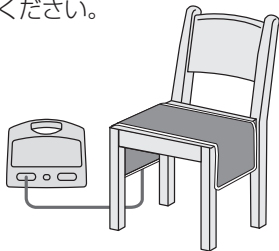


ソファーの場合

表面が布、皮革やビニール製品以外の上では使用しないでください。

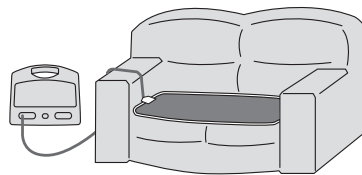

マットレスの場合

ゴワゴワと異物感のある場合、布団とマットレスの間に敷いてください

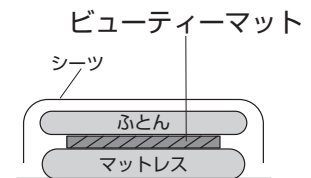


- 布団に敷く場合は乾燥した布団を使用してください。
- 電気を通しやすい物（金属製の物、湿気のある物）の上や下には敷かないでください。
- 身体から金属製の物（貴金属やアクセサリーなど）を外してください。
- ビューティーマットの上では絶対に超短波機器（マイクロ波を含む）を使用しないでください。
- 横になりながら使用する場合は身体の下にビューティーマットを直接敷かず、必ずビューティーマットの上にシーツなどを敷いてください。また、汗などで身体が濡れている場合は、よく拭いてからご使用ください。長時間湿気のコモった状態が続きますと、火傷や事故の原因となります。

構成内容

- 本器を初めてご使用になる前に、以下の本体、標準付属品が揃っているか必ずご確認ください。

本 体

※本体の各部名称とはたらきについてはP.16～17をご覧ください。

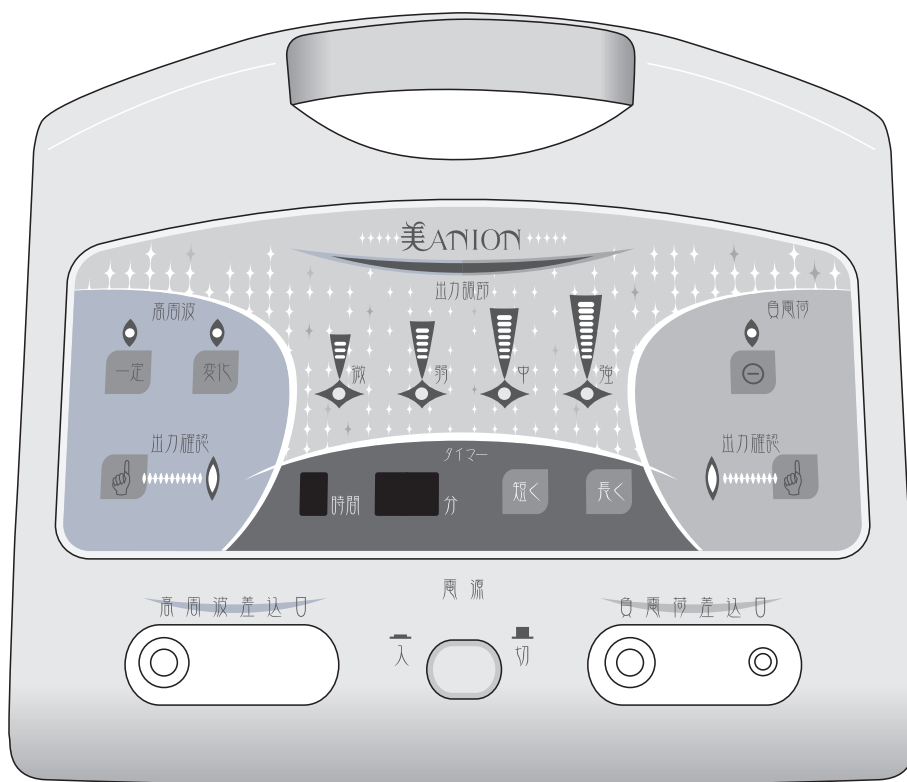

主な仕様

定格電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	15W
高周波時最大出力	800V
負電荷時最大出力	-200V
タイマー	0～8時間
本体寸法(mm)	270(高さ)×320(幅)×175(奥行)
本体重量	約3kg

標準付属品



品名	個数	注文番号
①ビューティーマット	1個	011700
②ボディスリムパットN	1個	012259
③アース接続コード〈フック型〉	1個	011697
④スリムベルト	1個	011707
⑤アースバンド	1個	011696
⑥フェイスパッド〈L・3個入り〉	1個	011704
⑦装着ベルト〈S〉	1個	011687
⑧ボディスリムパットN用ベルト	1個	012504

●取扱説明書

●簡単スタートガイド
(高周波編・負電荷編)

※付属品等に不足があった場合、
販売店または製造元までご連絡ください。

本体の各部名称とはたらき

高周波モード



- モードスイッチで「一定」または「変化」を押すとモード表示が点灯します。

- 一定** … 選んだ出力を連続して通電します。
- 変化** … 選んだ出力の範囲内で出力値が変化します。高周波刺激の慣れを防ぎ効果を持続させます。

※詳しくはP.18をお読みください。

- 出力確認スイッチで、高周波が正しく出力されているか確認できます。

※P.28の「出力を確認したい」をお読みください。

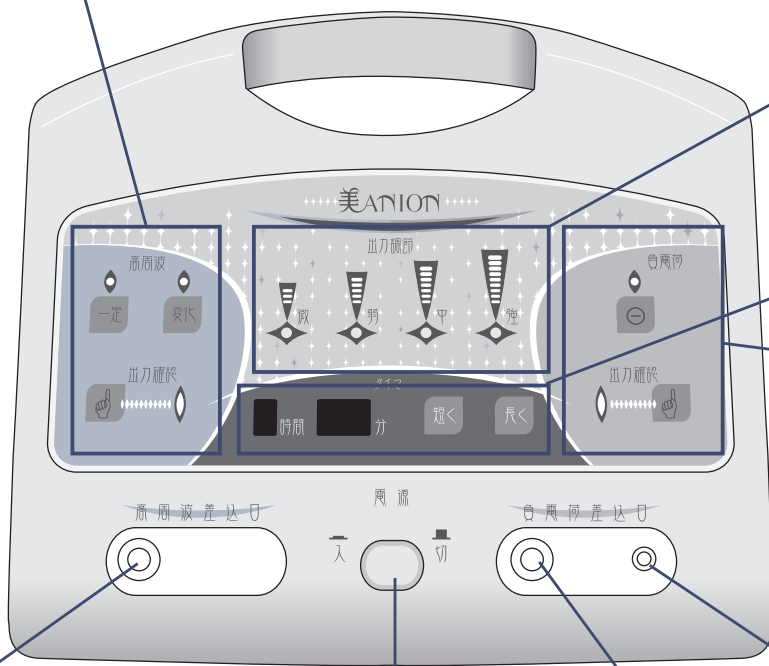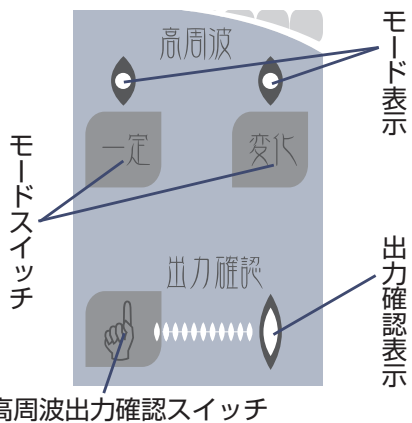

高周波差込口

- ビューティーマット、またはボディスリムパットNのプラグを高周波差込口に差し込みます。

電源スイッチ

- スイッチを押して、電源の「入」「切」を行います。
- 電源が入るとタイマーが「0分」を表示し、出力調節のランプ(微)が点灯します。



「入」の状態



「切」の状態

負電荷差込口

- ビューティーマットのプラグを左のマット差込口に差し込みます。
- アース接続コード(ホック型)のプラグを右のアース差込口に差し込みます。

出力調節

- 電源スイッチを押すと、「微」の出力表示が点灯します。
- 「微」以外の出力に変更する場合は、出力調節スイッチで選びます。
- 選んだ出力表示が点灯します。

※プラグが正しく差し込まれていないと、出力調節スイッチを押しても作動しません。詳しくはP.31をお読みください。

タイマー

- 出荷時は30分が初期設定されていますが、それ以降タイマーを変更してご使用になると、高周波・負電荷モードでそれぞれ前回設定した時間が表示されます。
- 時間を変更する場合はタイマースイッチを押します。一回押すごとに次のように変わります。

長く : 30分→1時間→2時間→4時間→8時間
 短く : 8時間→4時間→2時間→1時間→30分

- 30分以下は5分刻みで設定できます。

注)タイマーが「0分」になると出力は停止し、「タイマースイッチ」を押しても時間設定ができません。時間を変更する場合は再度「モードスイッチ」を押してください。

負電荷モード

- モードスイッチ を押すとモード表示が点灯します。
- 出力確認スイッチで、負電荷が正しく出力されているか確認できます。

※詳しくはP.28をお読みください。

背面 通気孔 布団をかぶせたり、壁に寄せたりして通気孔をふさがらないでください。本体内部が熱をもち、故障の原因となります。

電源コード (プラグ)
 家庭用コンセント(100V)にプラグを差し込みます。使用しない時は必ずコンセントから抜いてください。電源コードを本体背面のフックに巻き付ける際、コードを強く巻き付けると本体からのコード引き出し部やコード自体にストレスが加わり断線する恐れがあります。


アース端子 使用時に漏電ブレーカーが誤作動し、テレビやラジオなどに雑音が入ることがあります。また部屋の絶縁が悪いと出力が止まることもあります。この場合はアース端子を電源コンセントのアースに接続してください。詳細は販売店または製造元にご相談ください。

美ANIONの特徴

「美ANION」は、7万Hzの電波で全身を包みこみプロポーションを整える「高周波」と、マイナス電子を身体に作用させ、素肌のケアを行う「負電荷」のふたつの美容機能を搭載しています。

1. プロポーションを整える「高周波」

高周波のエネルギーが全身を包み込み、皮膚表面をやさしく刺激。理想のプロポーションへ導きます。

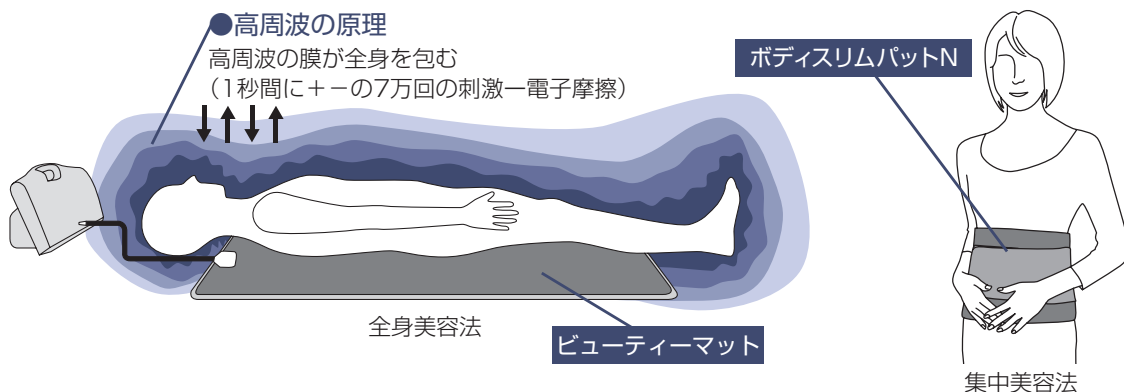

2. 高周波の「変化の出力」について


高周波のエネルギーが全身を包み込み、皮膚表面をやさしく刺激します。安定した刺激が続く「一定」モードと、プログラムされた出力が自動的に変わる「変化」モードが選べます。

「変化の出力」について ※出力は全て「微」からはじまります。

出力が変化しても、出力表示は変化しません。「微」～「強」の選択した出力表示が点灯し続けます。


微を選択

微が60秒間出力し、6秒休止。
これを繰り返す。

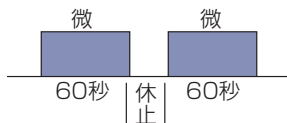


弱を選択

微と弱が60秒づつ出力し、6秒休止。
これを繰り返す。

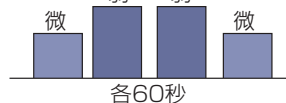


中を選択

微と弱と中が60秒づつ出力し、3秒休止。
これを繰り返す。

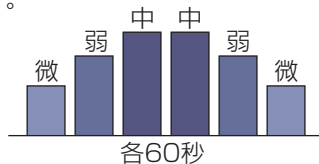


強を選択

微と弱と中と強が60秒づつ出力し、3秒休止。
これを繰り返す。

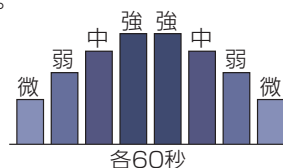

3. お肌を整える「負電荷」

負電荷の原理：マイナス電子を体に取り込むことで体内の活性酸素を抑制。お肌の回復力をサポートします。

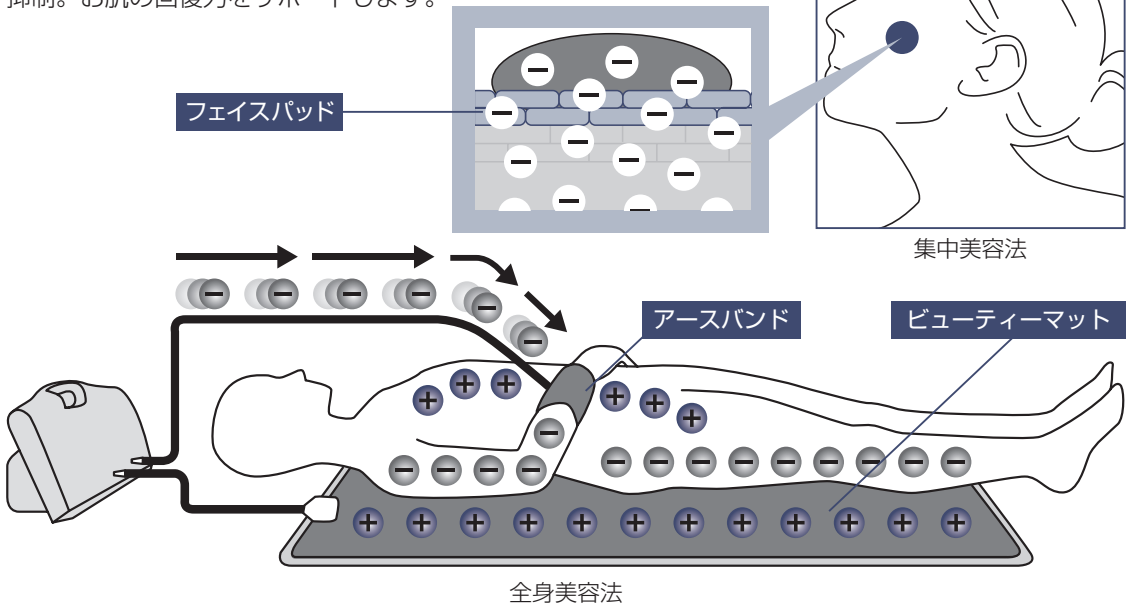

4. 時間と出力について

高周波モード、負電荷モードはいずれも身体にやさしく働きかける美容法です。いきなり長時間で使用されても効果が増すというものではありません。徐々に身体を慣らしていくことが大切です。下の表を参考に、はじめの頃は「時間は短め」に「出力は弱め」にして行ってください。

1日	→ 1週間	→ 2週間	→ 3週間	→ 1ヶ月
ステップ1 出力：微 30分	ステップ2 出力：弱 1時間	ステップ3 出力：弱 2時間	ステップ4 出力：弱 4時間	ステップ5 出力：弱 6～8時間 または 出力：中～強 3時間

体質によっては使い始めの2～10日位の間に、倦怠感（だるさ）などを感じる場合があります。その場合は時間を短く（10分以下）して、やり直してください。それでも身体のだるい方は下記の「お客様相談室」にご相談ください。

☎電話相談を実施しています お気軽にお問い合わせください。

機器の操作方法やその他のお問い合わせは

お客様相談室

TEL.048 (254) 1019 FAX.048 (254) 1049

受付：平日午前10時～午後5時30分（土・日・祝日休み）


※担当者の不在などで、当日のご対応ができない場合もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

ご使用にあたって


高周波モード—基本的な使用例

全身美容法

ビューティーマットを敷いて、その上で使用します

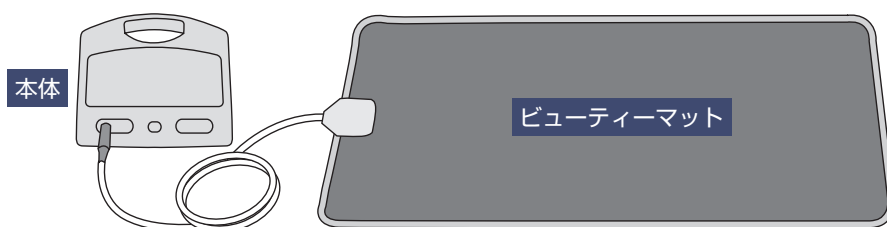


- 7万Hzの高周波エネルギーが全身を包み込み、皮膚表面をやさしく刺激します。
- ビューティーマットでの使用は全身に作用する使用法です。
- 安定した刺激の「一定」と、出力を自動的に変えて身体の慣れを防ぐ「変化」が選べます。
※P.18 高周波の「変化の出力」についてをお読みください。

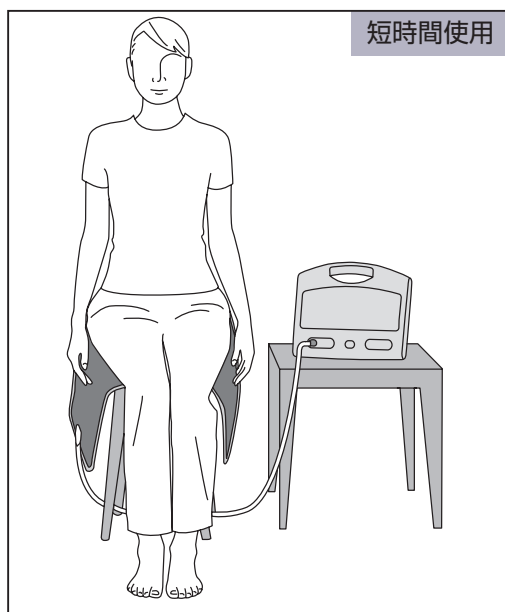

出力：中（使用当初は弱く）
時間：1時間以内


横になりながら使用する場合は、身体の下にビューティーマットを直接敷かず、必ずビューティーマットの上にシーツなどを敷いてください。
※図は使用法をわかりやすく説明するため、ビューティーマットの上にシーツは敷いていません。

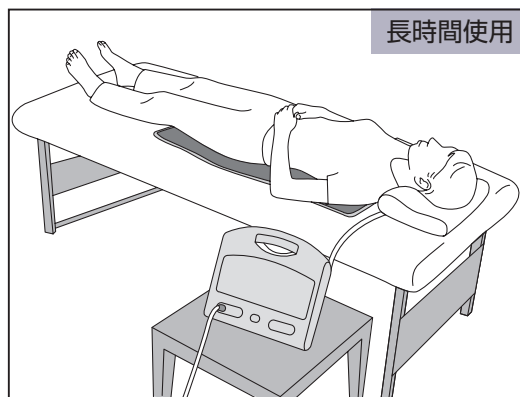

出力：微～弱（使用当初は弱く）
時間：6～8時間（使用当初は短く、30分から）

集中美容法


ひきしめたい部分にスリムベルトとボディスリムパットNを巻き付けて使用します。

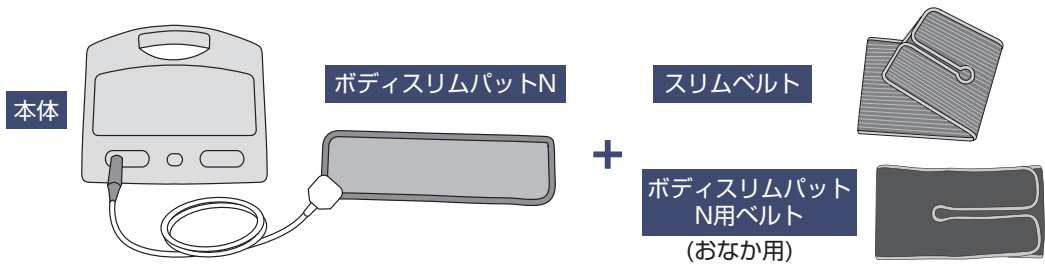

ボディスリムパットNとスリムベルトを使用することで、ひきしめたい箇所に直接作用し、効率よくプロポーションを整えます。

1 ボディスリムパットN用ベルトにボディスリムパットNをセットしてください。その際、緑色の面をお腹側にします。



奥までセットしてください

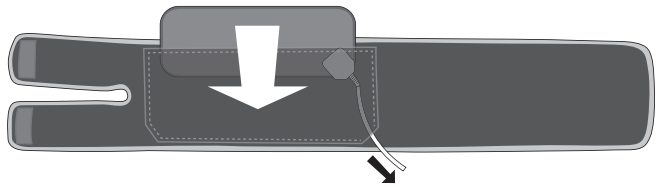


2 スリムベルトをお腹やお尻などひきしめたい部分に巻き付けます。2~3回締め直して、強く締めつけます。

お腹の使用例

お尻の使用例

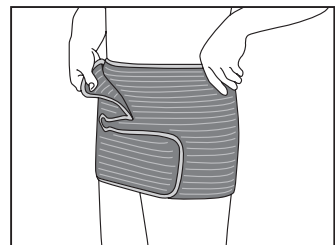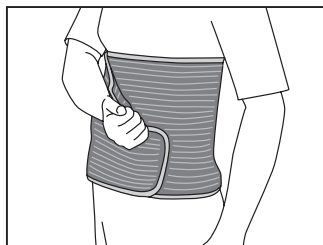


3 その上からボディスリムパットN用ベルトにセットしたボディスリムパットNを巻き付けてください。
出力：強
時間：30~60分

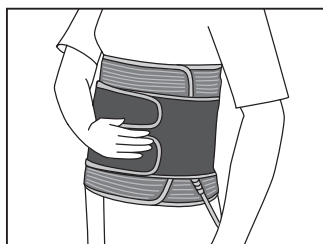

負電荷モード—基本的な使用例

全身美容法

アースバンドとビューティーマットを使用します

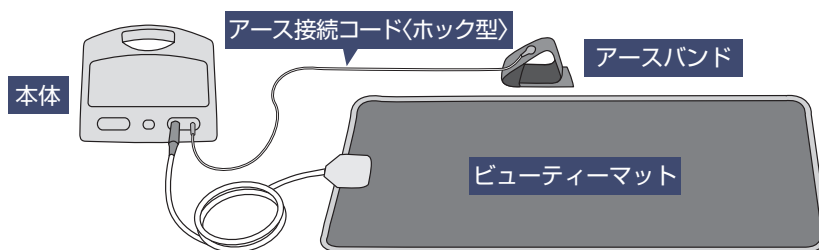


- マイナスの電子が全身に作用し、安定したマイナス電子の効果を得られます。
- アースバンドを腕にセットしてから、ビューティーマットの上で使用を開始してください。



ご使用の前にアース接続コードを準備します。

【全身美容法の場合】 アースバンド + アース接続コード<ホック型>


1 アース接続コード<ホック型>とアースバンドを接続します。ホックの凸と凹を合わせます。

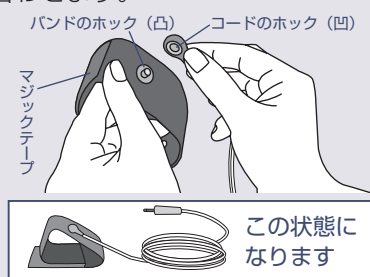

2 アースバンドは手首にセットし、マジックテープで固定します。その際、内側にある金色のホックが肌にあたるようにセットします。

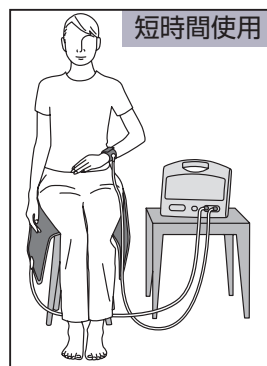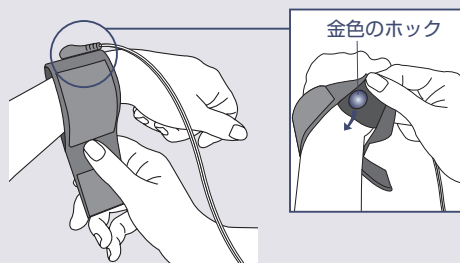

短時間使用

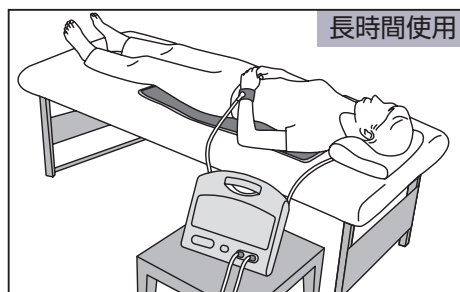

長時間使用

出力：中（使用当初は弱く）
時間：1時間以内


出力：微～弱（使用当初は弱く）
時間：6～8時間（使用当初は短く、30分から）

横になりながら使用する場合は、身体の下にビューティーマットを直接敷かず、必ずビューティーマットの上にシーツなどを敷いてください。

※図は使用法をわかりやすく説明するため、ビューティーマットの上にシーツは敷いていません。

集中美容法

フェイスパッド(L)とビューティーマットを使用します。


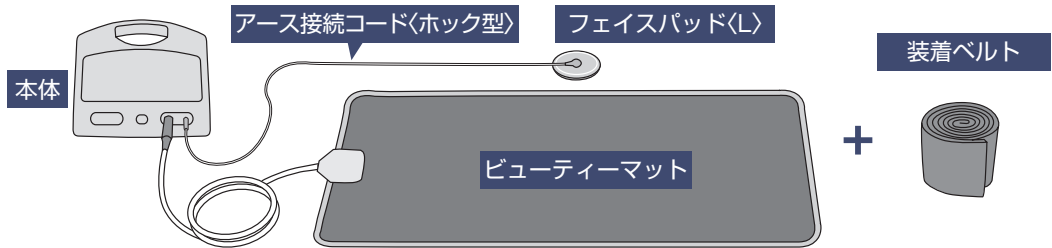


フェイスパッドを肌に密着させることで、目尻や目元、額などお手入れしたい箇所を集中してケアできます。


ご使用の前にアース接続コードを準備します。



アース接続コード<ホック型>とフェイスパッド<L>を接続します。ホックの凸と凹を合わせます。

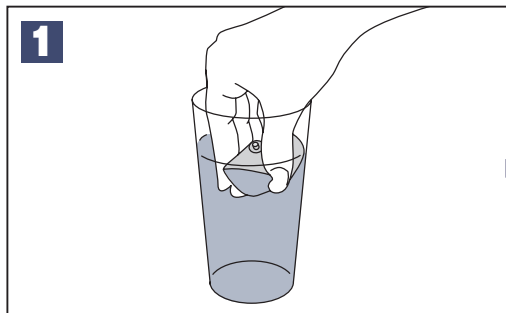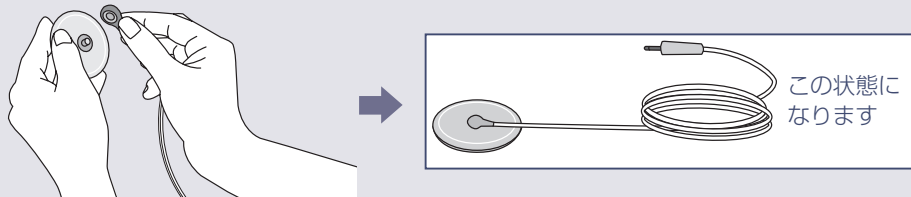


1
コップに水もしくは精製水を入れます。フェイスパッドを軽く揉むようにしてたっぷり水分を含ませ、滴らない程度に軽くしぼります。水を含むとパッド部分が膨らみます。
※水や精製水の代わりに化粧水を使用することも可能です。精製水は薬局でお求めになれます。

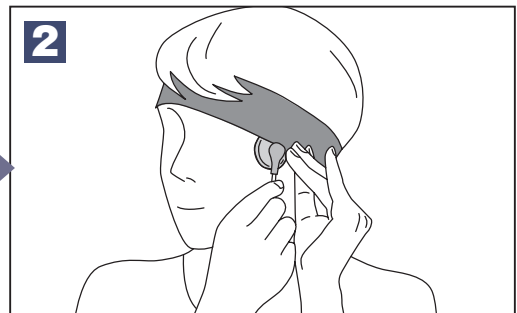


2
上記のようにアース接続コード<ホック型>を準備した後、フェイスパッド<L>をお手入れしたい箇所に当て、装着ベルトで固定します。
※洗顔後の清潔な肌の状態で行ってください。
※化粧水で肌を整えた状態で行うとより効果的です。

出力：強 時間：20～60分


高周波モード—使用順序

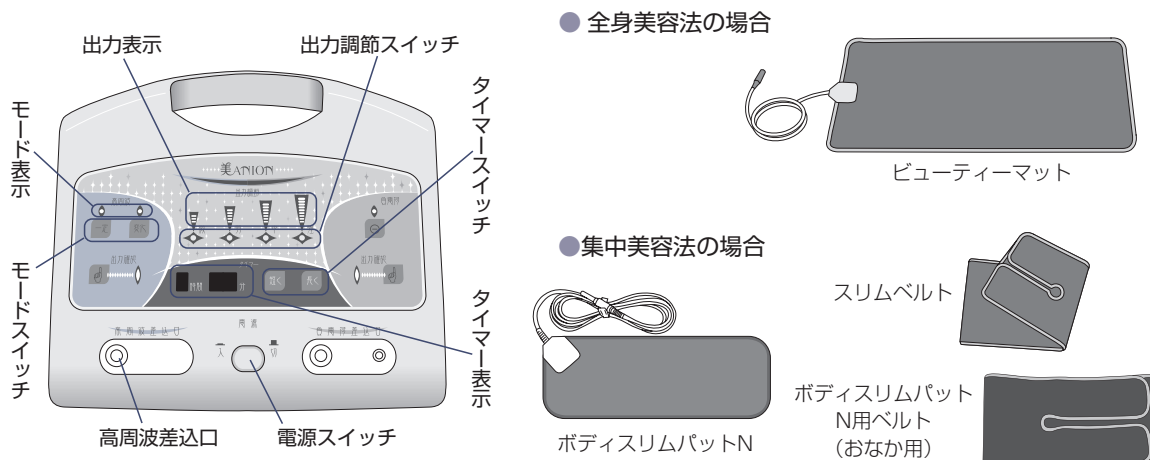

● 全身美容法の場合

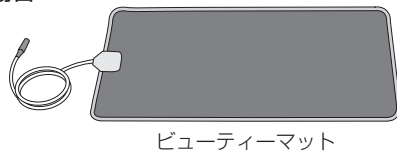


● 集中美容法の場合

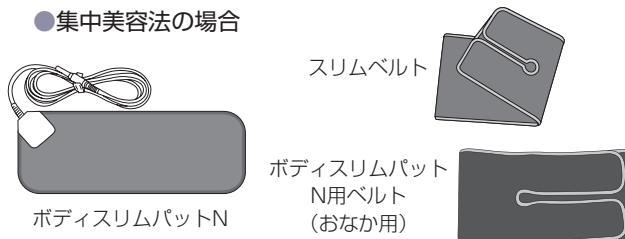


1 電源プラグをコンセントに差し込む


2 ビューティーマットのプラグを差し込む

- 使用する場所にビューティーマットを敷いてその上で使用するか、スリムベルトとボディスリムパットNをお手入れしたい部位に巻いて使用します。
- ビューティーマット、もしくはボディスリムパットNのプラグを左の「高周波差込口」に差し込みます。

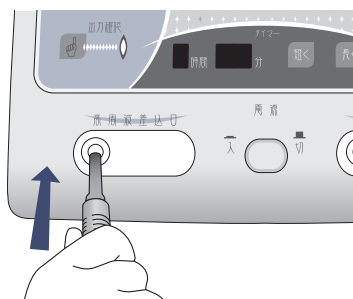


3 電源を入れる

- 電源スイッチをしっかりと押して () 電源を入れます。
- タイマーが「0分」を表示し、出力表示の「微」が点灯します。

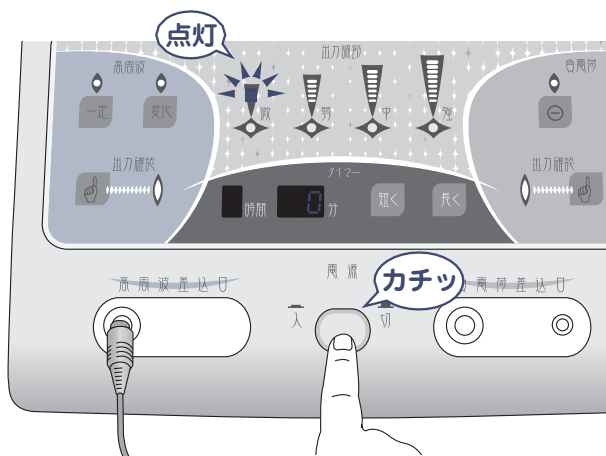

4 モードを選ぶ


- モードスイッチで「定」または「変」を選びます。
- 選んだモード表示が点灯します。
- タイマーが「30分」を表示します。

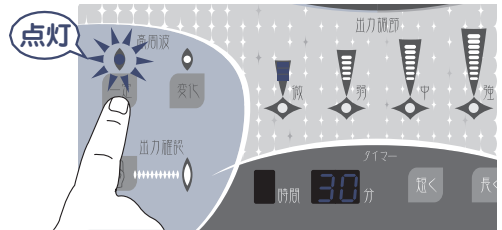


5 出力を選ぶ

- 「微」の出力が初期設定されています。
- 「弱」「中」「強」に設定する場合は、希望する出力調節スイッチを押します。
- 選んだ出力の出力表示が点灯します。


※出荷時は30分が初期設定されています。それ以降タイマーを変更してご使用になると、高周波モードで前回設定した時間が表示されます。

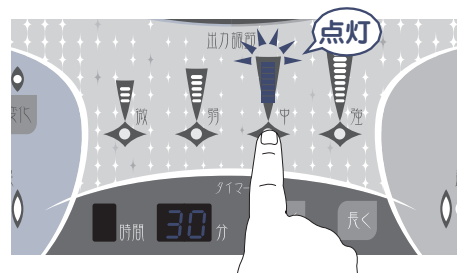

6 タイマーを設定する

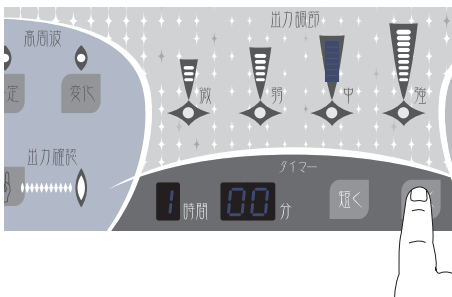


- タイマースイッチで時間を変更することができます。
- 「短く」を押すとタイマー表示が次のようになります。
30分→1時間→2時間→4時間→8時間
- 30分以上の状態では「短く」を押すと、タイマー表示が次のようになります。
8時間→4時間→2時間→1時間→30分……→
- ※30分以下は5分刻みで設定できます。
- ※「短く」を押してタイマーを「0分」にしてから終了すると、次回使用する際、タイマーは「5分」を表示します。

- 中断する場合
- 電源スイッチを押して（の状態）電源を切ります。
 - 再度、使用する場合は **3** から始めてください。

7 終了と延長


- タイマー表示が「0分」を表示すると、出力表示は「微」になり、モード表示が消えて、出力が自動的に切れます。
- 引続き高周波美容を行う場合は、**4** から始めてください。
- 使用を終了する場合は、電源スイッチを押して電源を切り、ビューティーマットもしくはボディスリムパットNのプラグを差込口から抜きます。

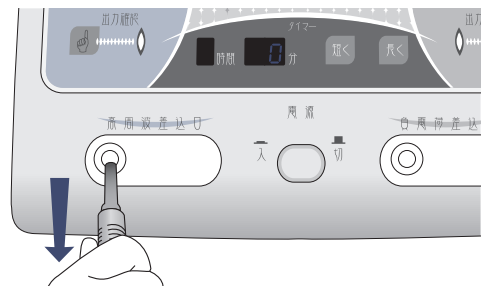

8 電源プラグをコンセントから抜く

ご使用にあたって

負電荷モード—使用順序

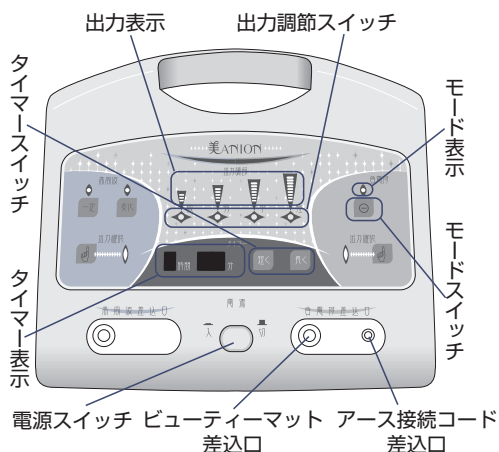

ビューティーマット

全身美容法の場合 アースバンド + アース接続コード〈ホック型〉


集中美容法の場合 フェイスパッド〈L〉 + アース接続コード〈ホック型〉 + 装着ベルト

- フェイスパッドやフェイスマスクを洗浄の際は、洗濯機を使用しないでください。中性洗剤で水かぬるま湯で浸け置き洗い後、十分にすすいでください。
- 洗浄後は乾燥機の使用は避け、タオルなどでふき取り、陰干ししてください。洗浄と乾燥が不十分な場合、腐敗臭、カビなどの原因になります。

1 電源プラグをコンセントに差し込む ● 電源スイッチが「切」になっていることを確認して、プラグをコンセントに差し込みます。


2 各プラグを差し込む

- 使用する場所にビューティーマットを敷いてその上で使用するか、フェイスパッドを装着ベルトで固定してから使用します。
- ビューティーマット、P.22~23で準備したアース接続コードの各プラグを「負電荷差入口」にそれぞれ差し込みます。

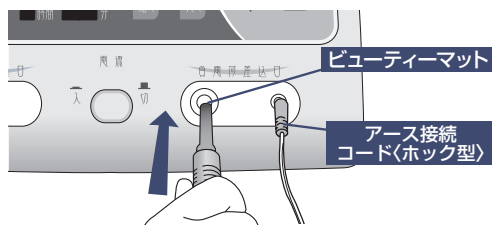


3 電源を入れる

- 電源スイッチをしっかりと押して (カチッ) 電源を入れます。
- タイマーが「0分」を表示し、出力表示の「微」が点灯します。

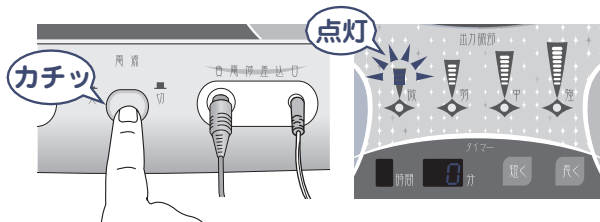


4 開始する

- アースバンド、もしくはフェイスパッドをセットしてから、モードスイッチ  を押します。
- 負電荷のモード表示が点灯します。
- タイマーが「30分」を表示します。


※出荷時は30分が初期設定されています。

それ以降タイマーを変更してご使用になると、負電荷でそれぞれ前回設定した時間が表示されます。

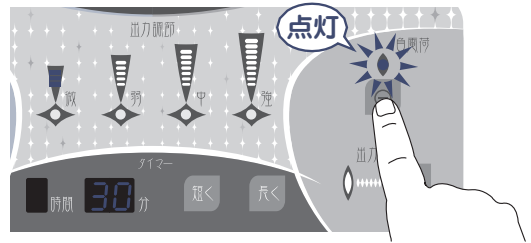


5 出力を選ぶ

- 「微」の出力が初期設定されています。
- 「弱」「中」「強」に設定する場合は、希望する出力調節スイッチを押します。
- 選んだ出力の出力表示が点灯します。

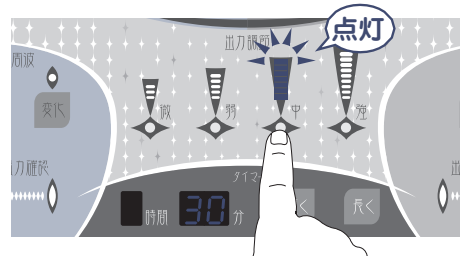


6 タイマーを設定する

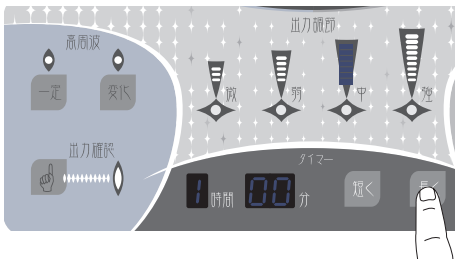

- タイマースイッチで使用時間を変更することができます。


-  を押すとタイマー表示が次のようになります。


30分→1時間→2時間→4時間→8時間

- 30分以上の状態では  を押すと、タイマー表示が次のようになります。

8時間→4時間→2時間→1時間→30分……→

※30分以下は5分刻みで設定できます。


※  を押してタイマーを「0分」にしてから終了すると、次回使用する際、タイマーは「5分」を表示します。

中断する場合 ●電源スイッチを押して ( の状態) 電源を切ります。

- 再度、使用する場合は **3** から始めてください。

7 終了と延長

- タイマー表示が「0分」を表示すると、出力表示は「微」になり、モード表示が消えて、出力が自動的に切れます。
- 引続き負電荷美容を行う場合は、**4** から始めてください。
- 使用を終了する場合は、電源スイッチを押して電源を切り、各プラグを差込口から抜きます。

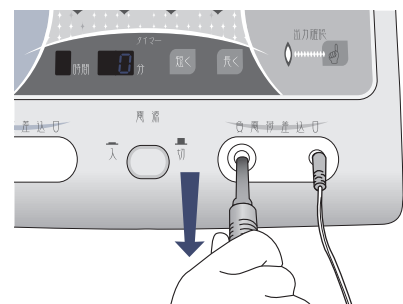


8 電源プラグをコンセントから抜く

こんな時どうしたらいいの？

1. 出力を確認したい


● 高周波の出力確認法・出力確認スイッチで確認

- ① 高周波を使用している際に、「出力確認スイッチ」を押してください。
- ② 高周波が正しく出力されていると、出力確認スイッチを押している間、「出力確認表示」が点灯し、音が鳴ります。

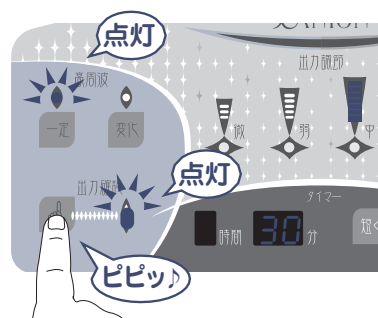

● 負電荷の出力確認法・出力確認スイッチで確認


- ① 負電荷を使用している際に、「出力確認スイッチ」を押してください。
- ② 負電荷が正しく出力されていると、上記同様「出力確認表示」が点灯し、音が鳴ります。

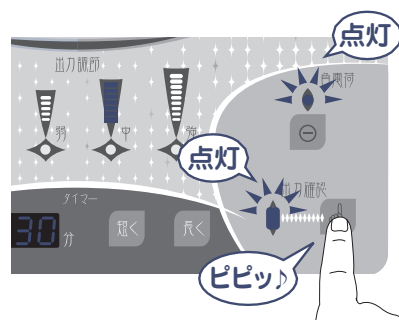

2. エラーが表示される

高周波出力中に、何らかの原因で出力システムにエラーが発生し、内部検出回路がこれを検知すると、「ピー」*という警告音とともに出力が停止し、タイマー表示に「E」のエラーが表示されます。

*ブザー音「切」が設定されている場合は、警告音は鳴りません。詳しくはP.29をお読みください。

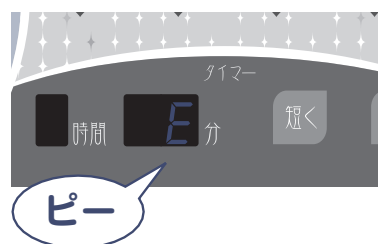

状 況	対 応
<ul style="list-style-type: none"> ○「ピー」という警告音とともに出力が停止する。 ○電源以外のすべての操作ボタンが無効となる。 	<p>電源スイッチを押して、電源を「切」の状態にした後、再度電源スイッチを押して「入」の状態にする。</p>

上記の対応をされてもエラー表示する場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、または製造元へお問い合わせください。


3. パネルの明るさを調整したい

- ① 高周波または負電荷の出力中に、モード表示が点灯しているモードスイッチを、1秒間以上押してください。
- ② 表示の明度が、「明」 ↔ 「暗」に変化（2段階変化）します。

- 現在の表示明度が「明」→ 上記操作 → 表示明度「暗」
- 現在の表示明度が「暗」→ 上記操作 → 表示明度「明」

この設定は、本操作を再度行わない限り、電源を切っても最後に設定した明度で表示されます。

※出荷時は表示明度「明」が初期設定されています。

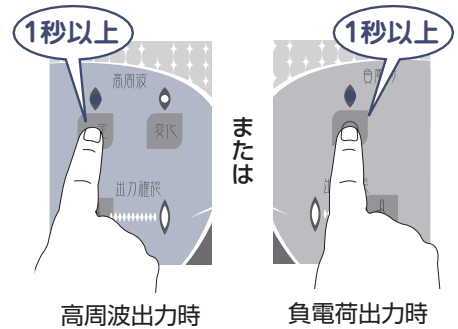


各表示の明度が反転します
例：タイマー表示



4. ブザー音を消したい

- ① 電源「切」の状態ですりタイマーの「短く」「長く」のタイマースイッチを同時に押したまま、電源スイッチを押して電源を「入」にしてください。
- ② 電源を「入」にしてから、2秒以上「短く」「長く」ボタンを同時に押し続けると、ブザー音「切」が設定されます。

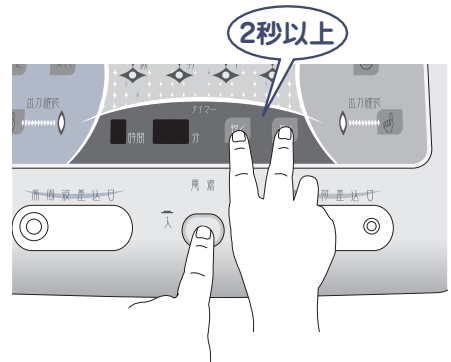

「切」に設定したブザー音を「入」にしたい場合は、再度上記操作を行うと設定が反転します。
この設定は、本操作を再度行わない限り、電源を切ってもブザー音 入/切 の状態が記憶されます。

- ※出荷時はブザー音「入」が設定されています。
- ※出力確認音は、ブザー音「切」が設定されていても鳴ります。

こんな時どうしたらいいの？

故障かな？と思ったら

●修理・サービスを依頼される前に、次の表に従ってお確かめください。

症 状	原因 ・ 対策
電源が入らない	電源プラグが100Vコンセントに差し込まれていますか？
出力調節スイッチ、タイマースイッチを押しても変更できない	ビューティーマット、ボディスリムパットN、もしくはアース接続コードは奥まで差し込まれていますか？ ビューティーマット、ボディスリムパットN、もしくはアース接続コードは正しい差込口に差し込まれていますか？ ※詳しくはP.31をお読みください。 →「ピピッ」とエラー音が鳴ります。 ※ブザー音「切」が設定されていると、エラー音は鳴りません。
コードのカバーが傷んでいる	電源プラグやコネクタ、コード類が傷んでいます。そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源プラグやコネクタ、コードの一部が熱い	
使用中にコード類を曲げたり伸ばしたりすると、通電が停止する	

定期点検を受けましょう！

本体や付属品は安全に使用し、性能を維持するために定期的（1年を目安）に点検を受けましょう。特に付属品は消耗品ですので、定期的に点検し交換してください。

※使用状態により異なりますので、販売店または製造元へお問い合わせください。

●電源プラグ、コード類は、定期的に点検・交換してください。

⚠ 注意

3年以上使用した付属品による事故については、弊社は責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご理解をお願いいたします。

お客様相談室

ご不明な点がございましたらお気軽にお電話ください。

TEL. 048 (254) 1019

受付：平日（月～金曜日）


午前10時～午後5時30分（土・日・祝日休み）

※担当者の不在などで、当日のご対応ができない場合もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。


こんな時どうしたらいいの？

- プラグ類が正しい差込口に奥まで差し込まれていないと、「ピピッ」とエラー音が鳴り、本器は作動しません。正しくプラグが差し込まれているか、お確かめください。
※ブザー音「切」が設定されていると、エラー音は鳴りません。

高周波モード

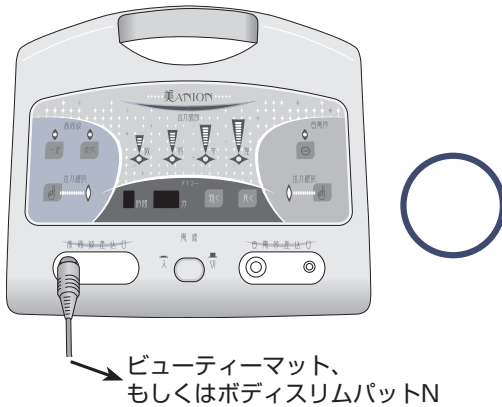


負電荷モード

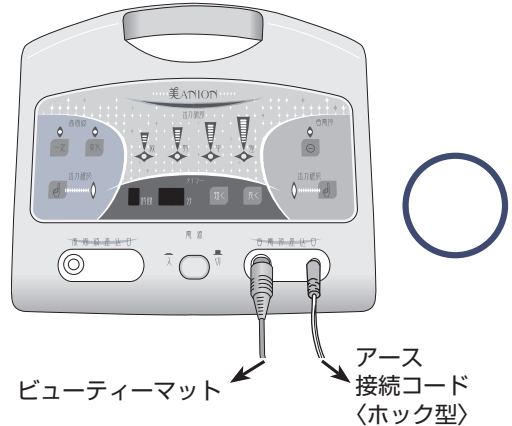


- 下の図のようになっていると、本器は作動しません。上の図のように正しくプラグを差し込んでください。





プラグが差し込まれていない

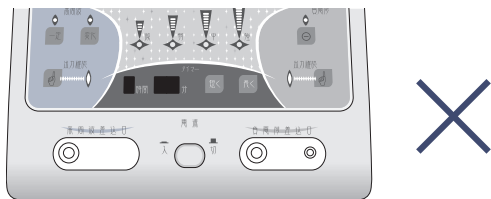

高周波と負電荷の両方の差込口にプラグが差し込まれている（高周波と負電荷の同時使用はできません）

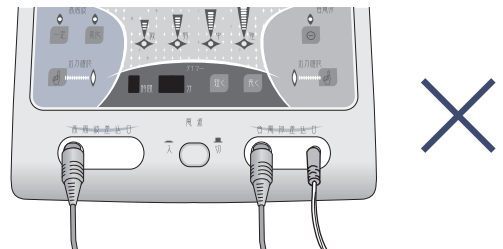

負電荷モード時、いずれかの差込口にプラグが差し込まれていない

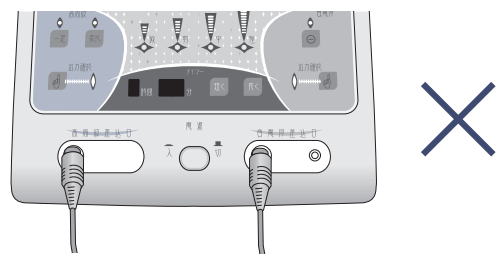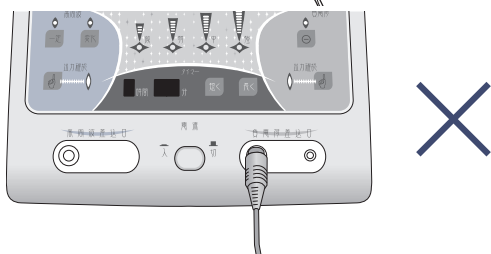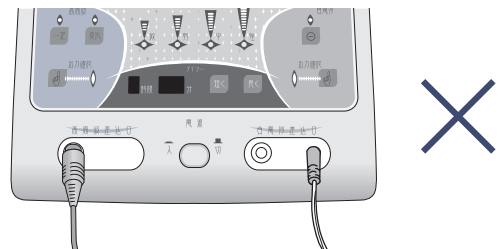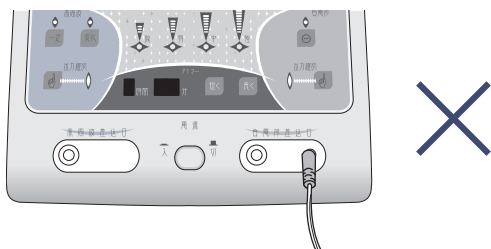

お客様安心サービス

保証書とユーザー登録カードについて

保証書について

修理などアフターサービスを受ける際に必要となりますので大切に保管してください。保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店または製造元にお問い合わせください。

保証書

本証は、お買い上げいただいた製品の、修理や交換を無条件に保証し、そのために必要と認められる場合、その修理費用や交換費用に限り保証いたします。ただし、保証をよりお読みの上、お読みください。

ご購入製品名	SN
ご購入年月日	保証期間
年 月 日	ご購入日から 1 年間
お客様へ、ご留意、ご留意事項	
保証店名称	

伊藤超短波株式会社 048-254-1019
〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8 http://www.itolator.co.jp/

ユーザー登録カードについて

ご住所・生年月日・お買い求めの販売店などをご記入の上、郵便ポストに投函してください。

※ご記入いただく個人情報、弊社製品・サービスの提供及びご案内、ユーザーサポート、商品に関する研究及び企画開発等のために、弊社及び販売店が利用させていただきます。

ユーザー登録カード ご購入は商品ではつきりとの差をください。

フリガナ	ご購入年月日
ご氏名	年 月 日
ご住所	年 月 日 番 号 郵便 番号
ご住所	〒
電話番号	FAX

※ご記入いただく個人情報、弊社製品・サービスの提供及びご案内、ユーザーサポート、商品に関する研究及び企画開発等のために、弊社及び販売店が利用させていただきます。また、弊社および第三者に転送・提供することがあります。詳しくはwww.itolator.co.jp/

アフターサービス

機器の操作方法やその他のお問い合わせは

お客様相談室

TEL.048 (254) 1019 FAX.048 (254) 1049

受付：平日午前10時～午後5時30分（土・日・祝日休み）

※担当者の不在などで、当日のご対応ができない場合もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

ISO 認証取得

弊社は医療機器品質マネジメントシステムISO 13485、環境マネジメントシステムISO 14001(工場)を取得しています。

製造元  伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8
☎048 (254) 1015
<http://www.itolator.co.jp/>

ヘルスケア営業部：営業所

仙台 ☎022 (306) 3883 大阪 ☎072 (242) 1015
首都圏 ☎048 (254) 1016 広島 ☎082 (292) 3320
横浜 ☎045 (949) 0024 福岡 ☎092 (591) 3697
名古屋 ☎052 (703) 2207 鹿児島 ☎099 (255) 6587

販売店