



美の秘密は、自宅ケア。

未来を変えるのは、今の選択。  
毎日の小さな一歩が、大きな未来を築く。

明日は、今日の積み重ね。  
その明日をより輝かせるための選択、  
それが今、この瞬間にある。

あなたの可能性は無尽大。  
限界を超えて、新しい世界へ。  
楽しいと思える、明日の自分をつくろう。



「本質的な価値を届ける」

トップアスリートに提供してきたEMS技術のすべてを、この一台に。

# Twin Beat

ツインビート  
インフィニティ

メーカー希望小売価格 330,000円 (税抜 300,000円)

### 主な仕様

定格入力電圧	… DC12V (付属の充電 AC アダプター(入力 AC100V)) DC7.4V (リチウムイオン充電電池)	出力レベル	… 1~90 レベル (※)
定格消費電力	… 約 15W (最大出力時)	タイマー	… トレーニングコース : 15/30 分 ハイブリッドコース : 7/12 分 リラク্সコース : 15/30 分 ビューティーコース : 10 分 (固定)
搬送周波数	… 5000Hz (max)		
本体サイズ	… 縦 174× 横 85× 厚さ 32 (mm)		
重量	… 約 310g (リチウムイオン充電電池含む)		

※ビューティーコースのフェイスケアは1~30レベル、スカルプケアは1~50レベル、トリートメントは50μA固定

### 標準付属品

- 1 本体 1個
- 2 ボーチ 1個
- 3 充電ACアダプター 1個
- 4 接続コード (1.15m・灰) 1本
- 5 接続コード (1.15m・黒) 1本
- 6 EMSスティック導子 1本
- 7 アクセルガード (L・50×90mm・4枚) 1袋
- 8 アクセルガード (M・50×50mm・4枚) 1袋
- 9 イトフェイスモイスチャーゲル (150g) 1本

\* リチウムイオン充電電池 ※工場出荷時:本体にセット済み  
\* 取扱説明書

### 別売オプション品

- 9 イトスカルプブローション 1本  
メーカー希望小売価格 6,600円 (税抜6,000円)



### 危険

下記のような医用電気機器との併用は、誤作動をまねく恐れがありますので使用しないでください。

- 1) ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- 2) 人工心肺等の生命維持用医用電気機器
- 3) 心電計などの装着型医用電気機器



### ITO Sports Project

物理療法機器メーカーのバイオニアとして、アスリートの活躍を応援しています。



イトスポーツプロジェクト 検索

<https://ito-sports-project.com/>

伊藤超短波は常に信頼と共にあります。

1916年創業の伊藤超短波は、物理療法のバイオニアとして、常に進歩と革新に挑戦し続けています。

伊藤超短波株式会社

国際規格 ISO 認証取得

医療機器品質マネジメントシステム …………… ISO 13485

環境マネジメントシステム …………… ISO 14001 (弊社筑波工場のみ取得)

お問い合わせは

発売元

伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8  
TEL.048-254-1019 (お客様センター)  
<https://www.itolator.co.jp/>

注) このカタログに掲載の記事、写真の無断転載を禁じます。全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。デザイン、仕様は改善のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

E0c001255-2312 A2401DL

本カタログの記載内容は、2024年1月現在のものです。

# Twin Beat

ツインビート インフィニティ



カラダアクティブ、  
引き締めと輝きを。

# 自宅で ホールボディケア

ボディ、フェイシャルをこの一台で

※ホールボディ=全身

電子運動器・美容器

**Twin Beat**

## よりアクティブに ツインビート∞

インフィニティ

より高いレベルでのトレーニング、ビューティーケアを実現。  
長年蓄積してきたEMS技術のすべてを  
この一台に搭載しました。

この一台で、トレーニングから  
ビューティーケアまで。

直感的な操作が可能な LCD カラータッチパネルを  
搭載。また、コンパクトなボディでありながら、業務用  
で使用されている技術やノウハウなどの高度な機能を  
搭載しています。

目的  
に  
応  
じ  
た  
4  
つ  
の  
コ  
ー  
ス

### トレーニングコース

5000Hzの中周波のEMSを搭載。  
より広く、より深く筋肉をトレーニング  
します。

バスト	うで
おなか	せなか
ウエスト	太もも
ヒップ	

### リラククスコース

TENS (テンス: 経皮的電気刺激 /  
Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)  
を使用し5つのモードで気になる部位を  
リフレッシュさせます。

肩	おなか
腰	膝
ふくらはぎ	

### ハイブリッドコース

自重エクササイズ (プランク・スクワット)  
と 5000 Hz の EMS を組み合わせることで  
高強度な運動が可能になる時短トレー  
ニングコース。

プランク(おなか)
スクワット(太もも・ヒップ)

### ビューティーコース

スカルブケア (EMS)、フェイスケア (EMS)、  
トリートメント (MCR\*) の3つのモードで  
頭皮やお顔のスキンケアを行います。

スカルブケア
フェイスケア
トリートメント

※ マイクロレント (微弱電流)


自宅に居ながら、本格的なケアを実現。

### ハイブリッド コース

#### プランク・スクワット × EMS

より広く、より深く、より効率的な高強度の筋肉運動を実現。

運動 × EMS > 短時間で、  
高強度トレーニング

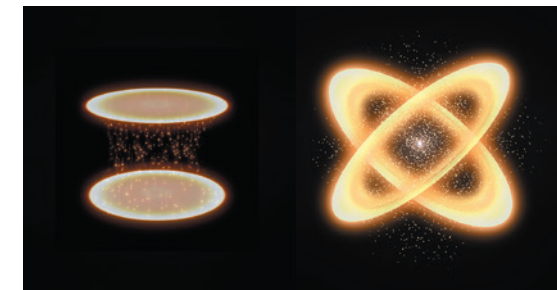

<2 極断続イメージ>

<4 極干渉波イメージ>



プランク



スクワット

### 3 極の EMSスティック 導子

スカルブケア、フェ  
イスケア、トリート  
メントの3つのモー  
ドで頭皮のケアや  
お顔のスキンケア  
が行えます。

#### 1. フェイシャル × EMS・MCR\*

電気刺激により、立体的に表情筋を動かし、フェイスラインを引き  
締めます。

明るさ × ハリ・ツヤ × 透明感



フェイシャル

#### 2. スカルプ × EMS・MCR\*

前頭部や、側頭部にうねるような刺激を与えて、頭皮をリフレッシュ  
します。

※頭皮に使用する際は、イトースカルブローション (別売オプション品) をご使用ください。

ケア × うるおい × リフレッシュ



スカルプ


\*MCR(マイクロレント): 生体電流と同じような微弱な電流でお肌や筋肉を整えます。

より高いレベルでのトレーニングからボディケアを。

### ハイパーニング機能

一時的に自動で出力が上がり効率よく  
トレーニングを行うことができます。

※ ハイパーニング機能は、トレーニングコースで30分タイマーを使用  
している場合、15分経過後に出力が自動で上がる機能です。

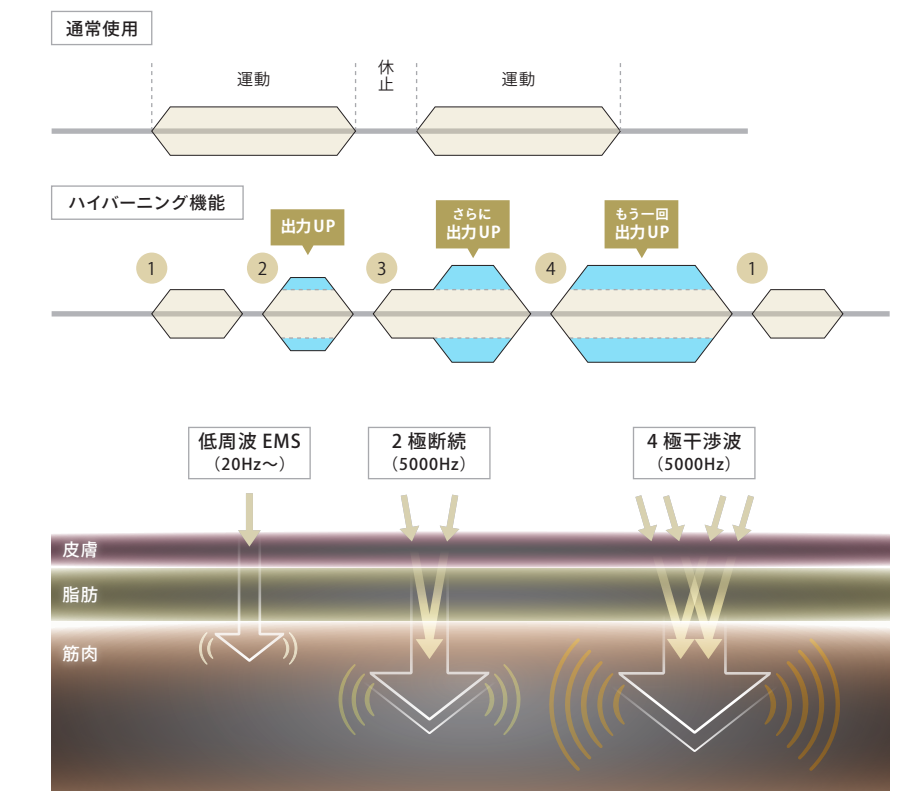

### 5000Hz 4 極干渉波\*による 筋肉運動

業務用機器で用いられる 5000Hz の 4 極  
干渉波を搭載。低周波 EMS 特有のビリ  
ビリ感を抑えながら、筋肉を刺激できます。

※ 右記のモード時のみ有効 [トレーニング] おなか・ウエスト  
[ハイブリッド] プランク  
[リラククス] おなか

